

# Bedienungsanleitung

## MASSAGE GUN



MunichSpring GmbH  
Dauthendeystr. 2  
81377 München

info@munich-spring.com  
www.munich-spring.com

Tel.: +49 89 5000 36 79



RE-2020

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Massagegerät von MunichSpring entschieden haben.**

**Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.**

### Sicherheitshinweise

- Ausschließlich nur für den Gebrauch durch Erwachsene.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung bitte Ihren Arzt, falls Sie Medikamente nehmen oder an einer Krankheit leiden.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung bitte Ihren Arzt, falls Sie Medikamente nehmen oder an einer Krankheit leiden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind und wenn eine der folgenden Beschwerden vorliegt: Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautentzündung, Herzschritt-macher, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthese oder Spondylose, kürzliche Gelenkersatz oder IUP's, Metallstifte oder -platten oder irgendwelche Bedenken bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit.
- Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Kleidung durch leichtes Drücken und Bewegung über den Körper für ca. 60 Sekunden pro Region benutzen.
- Sollten Sie sich bei der Benutzung dieses Gerätes unwohl fühlen, unterbrechen Sie die Benutzung und konsultieren Sie einen Arzt.
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie therapeutische Fragen zur Anwendung des Gerätes haben.
- Dies ist ein Gerät für die Verwendung im Haushalt für den persönlichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder staubigen Umgebungen, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät keiner Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Prüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht aufladen.
- Lassen Sie das Gerät, sofern es am Stromnetz angeschlossen ist, niemals unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht nutzen wollen.
- Benutzen Sie nur Zubehör, das von MunichSpring geliefert / empfohlen wird. Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn ein Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Bitte senden Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur an das Servicezentrum zurück.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine Teile, die der Nutzer selbst reparieren kann.

### Achtung

- Schlafen Sie nicht ein, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Einfluss von Alkohol sowie anderen Drogen oder wenn Sie sich körperlich nicht wohlfühlen.
- Der Transport des Produktes von einem kalten Lagerort in eine wärmere Umgebung kann zu Fehlfunktionen aufgrund von Wasserdampf führen. In diesem Fall lassen Sie das Gerät eine Stunde in der wärmeren Umgebung akklimatisieren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass Komponenten beschädigt sind oder es sich in einem ungewöhnlichen Zustand befindet.
- Falls während Ihrer Massage der Strom ausfällt, unterlassen Sie es, die Stromversorgung wiederherzustellen, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es donnert und blitzt


### Garantieansprüche

- Die Garantie ist nicht übertragbar.
- Diese Garantie greift nur, wenn das Produkt direkt bei MunichSpring erworben wurde.
- Ein Kaufnachweis (Originalbeleg) ist für alle Garantiereparaturen erforderlich.
- Alle stillschweigenden Garantien beschränken sich auf die gesetzlich vorgesehene Gewährleistungszeit sowie auf die Eignung und allgemeine Gebrauchstauglichkeit.
- Diese Garantie umfasst keine Schäden aufgrund von Zweckentfremdung, unsachgemäßem Gebrauch sowie unbefugter Änderung und Reparatur.
- Diese Garantie gilt nicht für Zubehörteile, die nicht zur Massageeinheit gehören.
- Diese Garantie gilt nicht für die Vermietung, oder geschäftliche, gewerbliche sowie institutionelle Nutzung, welche nicht unter den Privatgebrauch fällt.
- Alle von dieser Garantie abgedeckten Servicearbeiten müssen von MunichSpring genehmigt und ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
- Falls keine Ersatzteile für defekte Geräte verfügbar sind, behält sich MunichSpring das Recht vor, Ersatz anstelle von Reparatur oder Austausch zu leisten.

## Hauptgerät & Zubehör

- 1 x Massagepistole
- 1 x Handbuch
- 1 x Netzadapter
- 6 x austauschbare Aufsätze für den Kopf
- 1 x tragbare Tasche

1. **Scheibe**, der scheibenförmige Massagekopf massiert dank einer größeren Kontaktfläche dichtere Körperteile wie beispielsweise Quadrizeps, Gesäß- oder Brustmuskulatur.
2. **Zylinder**, die Zylinderform aus stahl sorgt für eine intensive und effektive Massage und hinterlässt ein angenehmes und entspanntes Gefühl.
3. **Kugel**, der weiche, kugelförmige Massagekopf eignet sich für die meisten Körperteile wie Nacken, Hüften, Gesäßmuskeln oder Quadrizeps.
4. **U-Form**, der U-förmige Massagekopf hat zwei Enden, mit denen Sie Knöchel, Fuß, Trapezmuskel oder das Gewebe rund um die Achillessehne massieren können. Er ist auch für Quadrizeps und Waden geeignet.
5. **Patronenform**, der patronenförmige Massagekopf eignet sich perfekt zur Massage von Triggerpunkten und kleineren Bereichen wie beispielsweise den Füßen.
6. **Flache Form**, der/die flache Kopf/Form ist für eine gewöhnliche Massage geeignet und für alle Bereiche des Körpers anwendbar.

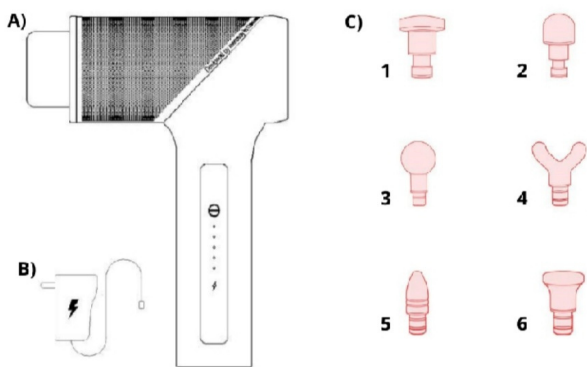

## Wirkung


- Lindert neuropathische Schmerzen und Steifheit
- Entspannt die Muskulatur und fördert den Abbau von Milchsäure
- Fördert die Durchblutung, beschleunigt das Aufwärmen und stellt die Vitalität wieder her
- Unterstützt den Stressabbau
- Fördert das allgemeine Wohlbefinden
- Für den ganzen Körper geeignet: Nacken, Rücken, Beine, Bauch und Füßen

## Anwendung

Halten Sie die Ein- und Ausschalttaste lange gedrückt um die Massage Gun ein- bzw. auszuschalten. Wenn Sie die Stufe ändern wollen, dann drücken Sie die Taste jeweils nur einmal kurz.

Die Stufenanzeige zeigt Ihnen die aktuelle Intensität der Massage an, welche sich in drei Stufen teilen lässt.

Die Akkuanzeige zeigt Ihnen den Ladestatus der Massage Gun an und verändert die Farbe je nach Akkustand.

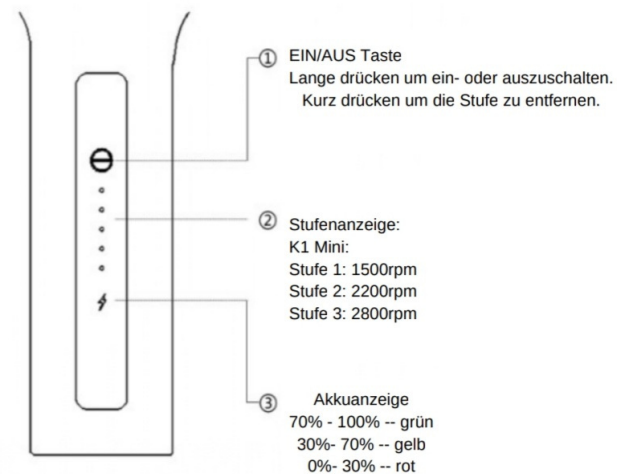

## Produktwartung

### Lagerung

- Lagern Sie das Massagegerät in seiner Box oder an einem sicheren, trockenen und kühlen Ort. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, welche die Oberfläche beschädigen könnten.
- Bitte wickeln Sie das Netzkabel auf und verstauen Sie es unter dem unteren Rahmen des Geräts. Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.

### Reinigung

- Tauchen Sie das Gerät während der Reinigung nicht in Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
- Nur mit einem weichen, leicht feuchten Lappen reinigen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glasreiniger, Möbelpolitur oder Farbverdünner.

## Technische Daten

- Produktname: Massage Gun
- Modellnummer: RE-2020
- Abmessungen: 33 x 30 x 9 cm
- Bruttogewicht: ca. 1,75 kg
- Nettogewicht: ca. 800 g
- Timer: automatische Abschaltung nach ca. 10 Min.
- Motordrehzahl: 1500-2800 U/Min.
- Leistung: 18-95 w
- Frequenz: 50/60 Hz
- Betriebsspannung: 100 - 240 V
- Amplitude: 11-15 mm
- Batterie: Lithium-Ionen Akku
- Batteriekapazität: 2600 mAh
- Batteriedauer: 90-210 Min.
- Ladezeit: 3-5 h

## Umweltschutz



Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt- und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

# Mehr als nur Entspannung

Ihr Wohlbefinden ist unsere oberste Priorität und wir setzen uns das Ziel Ihre Schmerzen effektiv zu lindern und Ihnen jederzeit und überall Entspannung zu bieten.

Mit Hilfe modernster Technologie und dem Wissen unserer Experten über die traditionelle asiatische Medizin haben wir Massage- und Wellnessprodukte entwickelt, die Sie in Ihrem stressigen Alltag begleiten und Ihnen die Bequemlichkeit und positive Energie verleihen. Dabei bedienen wir uns der Kraft der Natur und vereinen diese mit unseren Produkten, um Ihren Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen und wieder zu sich selbst zurückzufinden.

Mit Hilfe unserer Produkte können Sie entspannt und schmerzfrei durch den Tag und haben mehr Zeit und Energie im Alltag.

Wir sind bereits seit 2013 auf dem Markt und konnten seit Jahren unzähligen Kunden mit unseren Produkten helfen ihre Schmerzen loszuwerden. Ebenfalls sind wir auf vielen Messen anzutreffen, wodurch wir in der Lage sind unseren Kunden aktiv zuzuhören und wertvolles Feedback zu sammeln. Dadurch haben wir nicht nur Vertrauen aufgebaut, sondern waren auch im Stande unsere Produkte stets weiter zu entwickeln, welche an die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden angepasst sind.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und sollten sie Anregungen haben, haben wir immer ein offenes Ohr für Verbesserungen. Falls Sie noch mehr über uns und unsere Produkte erfahren wollen, können Sie uns jederzeit kontaktieren oder auch gerne persönlich vor Ort und auf Messen besuchen.